



Análizador de Hematología

HEMALYZER 2000



- ★ **Reactivo libre de cianuro.**
- ★ **Detección automático de reactivos.**
- ★ **Removedor automático de obstrucciones, lavado inteligente con tecnología de limpieza.**
- ★ **Diseño compacto, con chasis metálico.**
- ★ **Fácil y rápida operación de teclado, fácil accesibilidad al mecanismo interno.**
- ★ **Dilución automática de muestra en modo pre-diluido.**

Reactivos:

**HD31-20 Diluyente 20 Lt, HD31-5 Diluyente 5 Lt,
HD41-20 Detergente 20 Lt, HD41-5 Detergente 5 Lt,
HD21-1 Reactivo Litico 500 ml y HD43-100 Limpiador
de canula 100 ml.**

HLab

Análizador de Hematología

HEMALYZER 2000

Pensando en cubrir las necesidades de nuestros usuarios, llevamos hasta su laboratorio el Hemalyzer 2000.

Sistema automatizado de Hematología con 19 parámetros, 3 diferenciales y 3 histogramas, ideal para laboratorios y clínicas de mediano rendimiento con los avances tecnológicos de punta. Control de calidad integrado, para aseguramiento de la calidad.

- Equipado con excelente tecnología:
- Pantalla táctil (touch screen)
 - Impresora térmica interna
 - Puerto paralelo para impresora externa
 - Puerto RS232
 - Software para windows
 - Sistema de auto limpieza, para evitar obstrucciones por coágulos
 - Principio de lectura por impedancia para WBC, RBC y PLT
 - Principio de colorimetría para la lectura de Hgb, con reactivo libre de cianuro



Equipo ligero y compacto, diseñado para ahorrar y optimizar el espacio dentro de tu laboratorio.

Parámetros	19 parámetros (WBC, LY#, MID#, GRAN#, LY%, MID%, GRAN%, RBC, HGB, HCT, MVC, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT), 3 diferenciales de WBC y 3 histogramas.		
Principio	WBC, RBC, y PLT por Impedancia eléctrica y HGB Colorimetría fotoeléctrica.		
Volumen aspirado	Sangre total 18 µL, pre diluido 20 µL.		
Diámetro de abertura	WBC 100 µm y RBC/PLT 68 µm.		
Velocidad de análisis	60 muestras por hora		
Almacén de datos	Hasta 10,000 resultados (incluyendo los últimos 1,000 histogramas).		
Alarma	Mensajes de error.		
Diluciones		Sangre total	Sangre capilar
	WBC/HGB	1:232	1:400
	RBC/PLT	1:40000	1:45000
Pantalla	5.5" de LCD, resolución 320 x 240 pantalla táctil.		
Tamaño	430 mm x 300 mm x 420 mm.		
Fuente de poder	CA 110V – 230V, 50/60 Hz.		
Entrada/Salida	Teclado externo, impresora térmica interna, impresora externa, puerto RS232 para computadora.		
Garantía / Marca	1 año / HLAB		




CBC+3DIFF, 21 parámetros +3histogramas
 Rendimiento: 60 muestras por hora
 Software amigable para windows
 Con pantalla touch screen
 10,000 resultados, 1,000 histogramas
 Control de calidad



Análizador de Hematología

HEMALYZER 2000

Equipo accesible, compacto y con características únicas que hacen de él un gran aliado, ya que puede ser usado desde un consultorio médico hasta laboratorios que realicen un aproximado de 50 biometrías por día

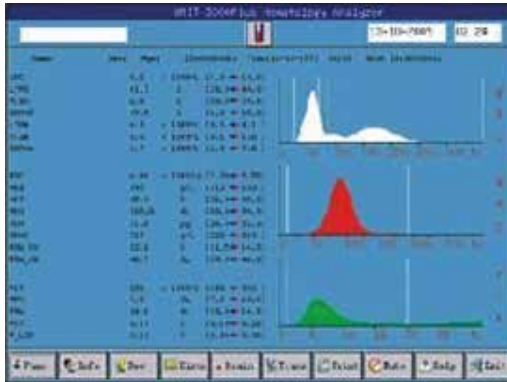

El Hemalyzer 2000 une el clásico método de conteo por impedancias con la más alta tecnología:

- *Pantalla a color y táctil (touch screen)
- *Impresora térmica interna y puerto para impresora externa
- *Puerto para teclado y mouse externo
- *USB para el almacenamiento de datos.



- *Diseño práctico y estético
- *Lavado inteligente con ciclos de autolimpieza interna programables
- *Ofrece gran estabilidad y protección contra interferencias que alteran el conteo de células
- *Excelente rendimiento de reactivos
- *Equipo abierto a otras marcas de reactivos

Incluye:

- * kit de arranque: DILUENTE 5L, DETERGENTE 5L Y LISANTE 500ml
- * Software para pc.
- *Instalación, puesta en marcha y capacitación a cualquier parte del país sin costo.
- *Mantenimiento Preventivo a los 6 meses sin costo. No incluye viáticos solo mano de obra y refacciones.

www.heedding.com

