



Analizador Automático de Hematología para animales

H-2000 VET



- ★ Analizador automático de hematología para el área veterinaria.
- ★ 13 especies animales pre-definidas
- + 3 especies programables.
- ★ 60 muestras por hora .
- ★ Diferencial de 3 partes, 21 parámetros
- + 3 histogramas.

Reactivos:

HD31-20 Diluyente 20 Lt, HD31-5 Diluyente 5 Lt,
HD41-20 Detergente 20 Lt, HD41-5 Detergente 5 Lt,
HD21-1 Reactivo Litico 500 ml y HD43-100 Limpiador
de canula 100 ml.

HLab


Características

- 13 especies animales pre-definidas + 3 especies programables.
- Gran pantalla LCD a color.
- Soporte de copia de seguridad USB.
- Puerto para mouse y teclado externo.


Analizador Automático de Hematología para animales

H-2000 VET

Tipo de animal	Perro, gato, caballo, cerdo, vaca, búfalo, conejo, mono, rata, ratón, oveja, cabra, camello y 3 tipos definidos por el usuario.
Parámetros	WBC, LYM#, MID#, GRAN#, LYM%, MID%, GRAN%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC Diferencial de 3 partes de WBC, 21 parámetros y 3 histogramas
Principios de operación	WBC/RBC/PLT: Impedancia eléctrica HGB: Colorimetría fotoeléctrica
Vol. de aspiración	Sangre completa 10uL, Prediluida 20uL
Diámetro de apertura	WBC100um RBC/PLT 60um
Rendimiento	60 muestras / hora
Vel. de la prueba	60 segundos/muestra
Almacenamiento de datos	Más de 100, 000 resultados con histogramas
Pantalla	LCD color, 10.4 pulgadas, resolución 640 x 480
Requerimientos de energía	AC 100V – 240 V, 50/60 Hz, 180W
Entrada/Salida	Soporta RS232, puerto de red estándar y USB. Teclas de acceso directo con mouse estándar y teclado. Impresora térmica interna de 57 mm. Puerto paralelo y USB para impresora externa.
Garantía /Marca	1 año / HLAB

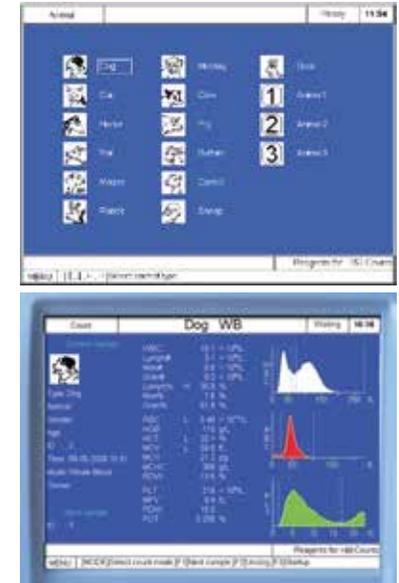

- Pantalla principal.
- Información del animal.
- 13 especies animales pre-definidas + 3 especies programables.

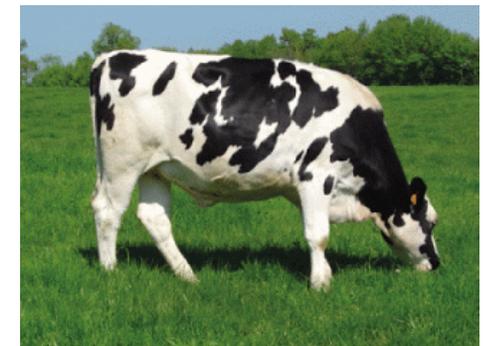

Incluye:

- * kit de arranque: DILUENTE 5L, DETERGENTE 5L Y LISANTE 500ml
- * Software para pc.
- * Instalación, puesta en marcha y capacitación a cualquier parte del país sin costo.
- * Mantenimiento Preventivo a los 6 meses sin costo. No incluye viáticos solo mano de obra y refacciones.

